

BD Rowa™ EasyLoad/ProLog

OCR - Gestion des dates de péremption

1 Démarrer la gestion de la date de péremption de l'OCR

 Ouvrez le programme OCR de gestion des dates de péremption sur votre ordinateur.

 Ouvrez **Analyse d'images** pour traiter les dates de péremption.


 La **Liste d'articles** vous indique le nombre total de boîtes qui doivent être contrôlées.



Vous voulez en savoir plus ?

Visitez le BD Rowa™ Customer Learning Center à <https://clc.rowa.de>.

2 Indiquer la date de péremption

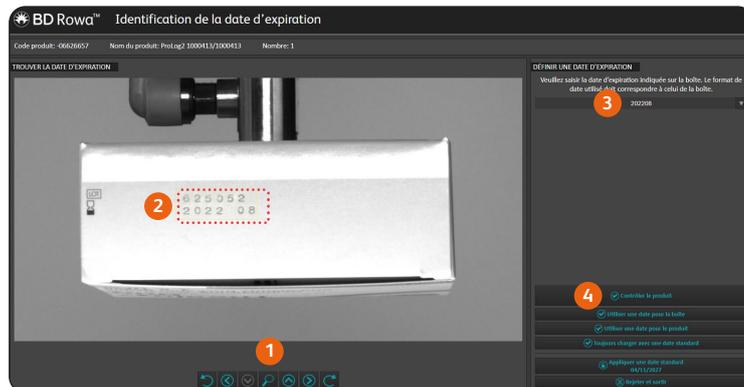

- 1 Utilisez les boutons de contrôle pour trouver l'image qui contient la date de péremption.
- 2 Tracez un cadre autour de la date de péremption.
- 3 Saisissez la date de péremption exactement comme elle est écrite sur la boîte, y compris les caractères tels que -, ., et /.
- 4 Vérifiez la date.

3 Reconnaissance de la date de péremption

Cliquez sur le bouton **Contrôler le produit** pour vérifier la date. Le système va maintenant essayer de reconnaître la date sur l'image.

2022 08 Date reconnue

La date s'affiche en vert. Cliquez sur **Appliquer** pour appliquer la date à la boîte concernée. Le logiciel est maintenant capable de reconnaître automatiquement les dates pour cet article.

2023 08 Date non reconnue

La date est affichée en rouge. Sélectionnez **Utiliser une date pour la boîte** ou sortez la boîte pour la recharger manuellement.

Comment utiliser les boutons de commande

-   Trouvez l'image qui contient la date de péremption.
-   Faites pivoter l'image de manière que la date soit lisible.
-   Modifier l'éclairage pour améliorer la reconnaissance de la date.
-  Utilisez la loupe pour une meilleure vue.

Conseils

- Une **date par défaut** sera automatiquement appliquée au bout de **5 jours** si l'article n'est pas traité par le programme OCR.
- Utilisez le bouton **Toujours charger avec une date standard** pour traiter automatiquement les boîtes sans date de péremption.
- Si une date n'est pas immédiatement reconnue, vérifiez la date que vous avez écrite et le cadre, puis réessayez.
- Vous pouvez faire une pause à tout moment et continuer plus tard.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service BD Rowa™.

Ce document ne remplace pas le mode d'emploi. Le contenu du mode d'emploi doit également être lu attentivement et respecté !

bd.com/rowa

BD, le logo BD, Rowa, EasyLoad et ProLog sont des marques commerciales de Becton, Dickinson, and Company ou de ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2024 BD. Tous droits réservés. (Feb-2024 NPM-3807)

