

BD Rowa™ EasyLoad/ProLog

OCR - Gestione date di scadenza

1 Avviare la gestione della data di scadenza OCR



Aprire il programma di gestione della data di scadenza OCR sul computer.



Aprire **Analisi delle immagini** per elaborare le date di scadenza.




L'**Elenco degli articoli** mostra il numero totale di confezioni da controllare.



Vuoi saperne di più?

Visita il BD Rowa™ Customer Learning Center all'indirizzo <https://clc.rowa.de>.

2 Indicare la data di scadenza di un nuovo articolo

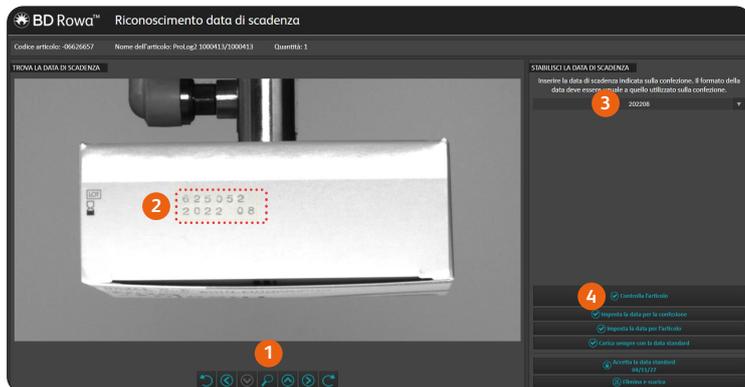

- 1 Usare i pulsanti di controllo per trovare l'immagine che contiene la data di scadenza.
- 2 Disegnare una cornice intorno alla data di scadenza.
- 3 Inserire la data di scadenza esattamente come è scritta sulla confezione, compresi i caratteri come -, ., e /.
- 4 Controllare la data.

3 Riconoscimento della data di scadenza

Fare clic sul pulsante **Controlla l'articolo** per verificare la data. Il sistema cercherà di riconoscere la data dell'immagine.

2022 08 La data è riconosciuta

La data è visualizzata in verde. Fare clic su **Accettare** per impostare la data delle confezioni. Il software è ora in grado di riconoscere automaticamente le date per questo articolo.

2023 08 La data non è riconosciuta

La data viene visualizzata in rosso. Selezionare **Imposta la data per la confezione** o uscire dalla confezione per rifornirla manualmente.

Come utilizzare i pulsanti di controllo

- Trovare l'immagine che contiene la data di scadenza.
- Ruotare l'immagine in modo che la data sia leggibile.
- Modificare le impostazioni di illuminazione per migliorare il riconoscimento della data.
- Utilizzate la lente d'ingrandimento per una visione migliore.

Suggerimenti

- Una **data standard** verrà applicata automaticamente dopo **5 giorni** se l'articolo non viene elaborato attraverso il programma OCR.
- Utilizzare il pulsante **Carica sempre con la data standard** per gestire automaticamente le confezioni senza data di scadenza.
- Se la data non viene riconosciuta immediatamente, controllare la data scritta e la cornice e riprovare.
- È possibile interrompere in qualsiasi momento e continuare in un secondo momento.

In caso di domande, non esitate a contattare il servizio di assistenza BD Rowa™.

Questo documento non sostituisce le istruzioni operative. Anche il contenuto delle istruzioni operative deve essere letto attentamente e seguito!

bd.com/rowa

BD, il logo BD, Rowa, EasyLoad e ProLog sono marchi di fabbrica di Becton, Dickinson and Company o delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. © 2024 BD. Tutti i diritti riservati. (Feb-2024 NPM-3808)

